

## Bioquímica

### Electroforesis Automática Sistema GIANT HS®




2008



Sistema ultra compacto, automatizado, de sobremesa de tan sólo 34 Kg y de unas medidas de 56x54x45 cm que lo hacen el perfecto equipo de sobremesa para aquellos laboratorios que necesitan automatizar el proceso de la electroforesis en un pequeño espacio.

Ideal para laboratorios de hasta máx 24 muestras diarias.

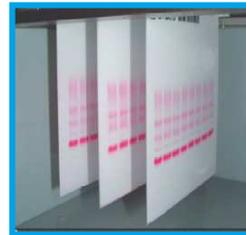

## MÉTODO

Sistema de electroforesis totalmente automatizado sobre membrana especial de acetato de celulosa. El sistema aplica la muestra, realiza la foforesis, tiñe, decolora y lee automáticamente las electroforesis sin intervención del usuario.

## MUESTRAS

Suero, orinas concentradas, hemoglobina.

## CAPACIDAD DE PROCESADO

8 muestras en técnica semimicro por tira. 24 muestras por ciclo.

## VELOCIDAD MEDIA

24 muestras/ 80 min

## INTERFACE BIDIRECCIONAL

USB. El ordenador con Windows XP controla todos los procesos.